


# TELEMED Echo Wave2 クイック操作マニュアル

## ■インストール方法

### 1. ドライバパッケージのインストール

- ・ インストール CD 内の Drivers フォルダにある「setup\_tdp.exe」を実行  
下記画面にて対象のシステムにチェックを入れ、Next をクリック

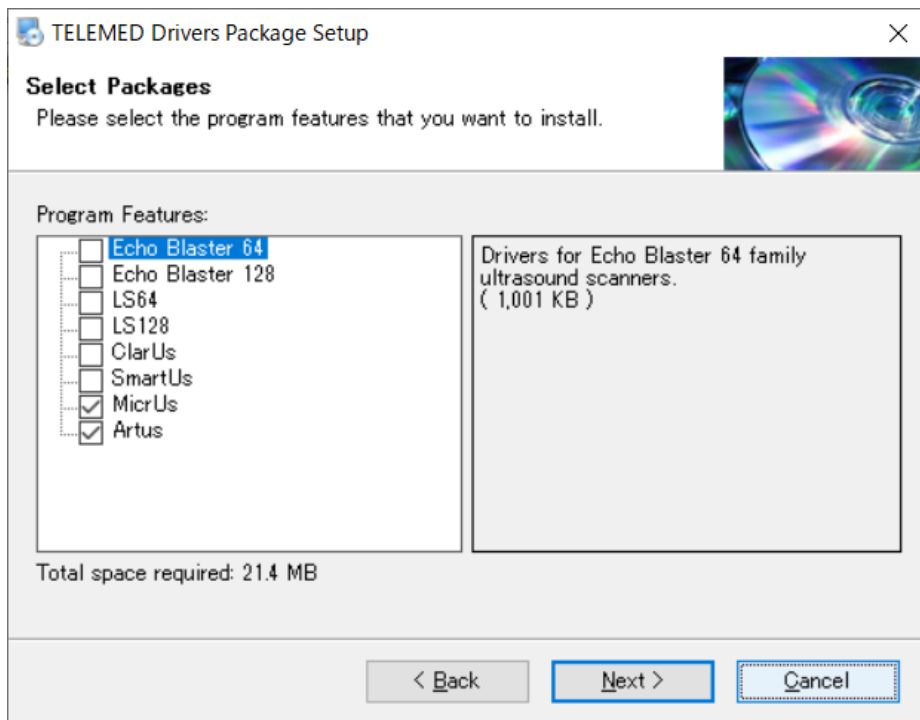


Finish となるまで Next ボタンをクリックしてインストールを進めてください。

### 2. Echo Wave2 のインストール


- ・インストール CD 内の Echo Wave2 フォルダにある「setup\_ew2.exe」を実行  
Finish となるまで Next ボタンをクリックしてインストールを進めてください。

インストールは以上で完了です。

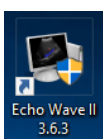

デバイスを USB で PC に接続し、  
デスクトップにできた Echo Wave2 のアイコンをダブルクリックして起動してください。

## Echo Wave2 メインウインドウ


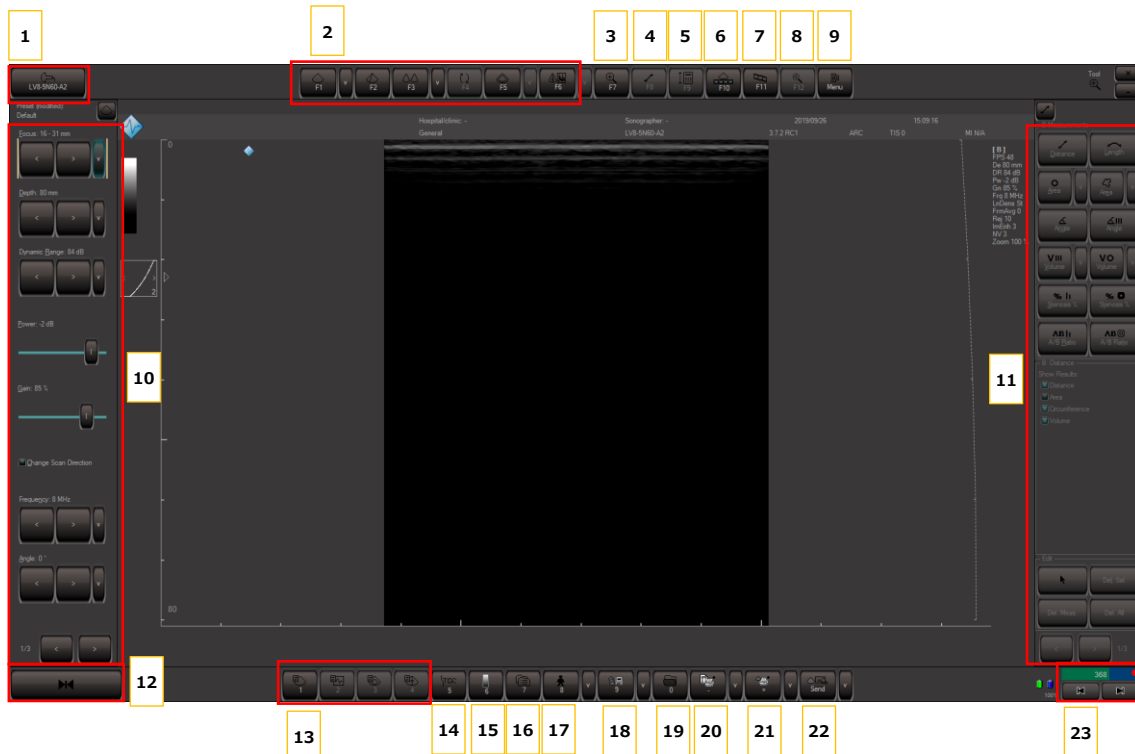


1. 接続されているプローブ
2. スキャンモードの切り替え
3. イメージのズーム
4. 計測ツール（フリーズ時に使用可。画面右側に表示されます。）
5. 計算ツール（フリーズ時に使用可。画面右側に表示されます。）
6. サムネイルイメージの表示・非表示
7. 動画（Cine）操作
8. イメージの自動調整（使用可能時のみアクティブになります）
9. メニュー
10. スキャン設定メニュー
11. 計測ツールメニュー
12. フリーズ/スキャン開始ボタン（スペースキーでも行えます）
13. スキャン設定メニュー呼び出し（画面左側に表示されます。）
14. TGC コントロール
15. イメージの色調整
16. スキャン設定のプリセットの呼び出し（画面左側に表示されます。）
17. 被験者データベース

18. イメージ・動画保存
19. イメージ・動画ファイルを開く
20. レポートの印刷
21. イメージの印刷
22. イメージをEメールで送信
23. 動画（Cine）のコントロール

#### ■スキャンの開始・停止 保存

- ・ ソフトウェアを立ち上げると自動的にスキャンは開始されます。
- ・ スペースキーまたは画面左下のフリーズ/スキャン開始ボタンを押すことで、イメージをフリーズさせることができます。
- ・ フリーズ時に画面左下の◀▶ボタン（または←→のキー）で表示フレームを移動できます。
- ・ 動画（Cine）はバッファに保存できるだけのフレーム数を繰り返し保存されます。画面右下の動画コントロールの緑色バーに赤丸が表示されているときに録画中です。保存フレーム数がバッファの上限に達すると、一番古いフレームから順に新しいフレームが上書きされます。
- ・ 一度スキャンを行った後、バッファに残っているフレームをクリアして新しく保存したい場合には、画面左下のフリーズ/スキャン開始ボタンを押してスキャンを開始してください。

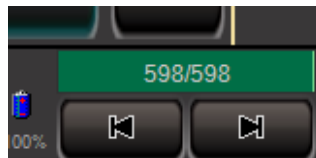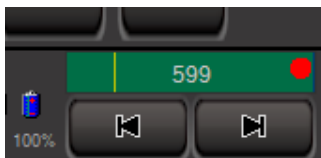

【左図：動画（Cine）保存中 / 右図：フリーズ中】

#### ■イメージ・動画（Cine）の保存

- ・画面下部のイメージ・動画保存ボタンの「V」をクリックすると、保存メニューが開きます。

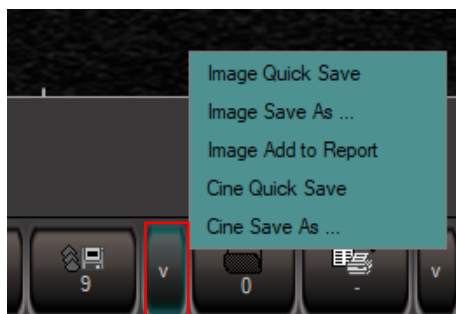


Image Quick Save： 表示中のイメージを設定したフォルダに保存

Image Save As： 表示中のイメージを任意の場所に保存  
(保存ダイアログが開きます。)

Image Add to Report： 表示中のイメージをレポートに追加

Cine Quick Save： 動画（Cine）を設定したフォルダに保存

Cine Save As： 動画（Cine）を任意の場所に保存  
(保存ダイアログが開きます。)

◎Quick Save 時の保存先フォルダは Menu>Tools>Options>Saving and Printing タブ内左上

Save files to folder: で変更可能です。